


メニューマップシート


詳しいメニューマップの見かたやメニュー設定の仕組みについては、取扱説明書 P.38 を参照してください。

▲	UNIT または MENU を押して、メニュー項目を探す。	⏪	を押して、前のメニュー項目に戻る。(メニュー操作中に を約3秒間押し続けると、質量測定モードに戻ります。)
▶	PRINT を押して、次のメニュー項目に進む。	📖	取扱説明書のページを参照
→/T←	を押して、確定する。	*	工場出荷時(メニューリセット時)の設定


メインメニュー

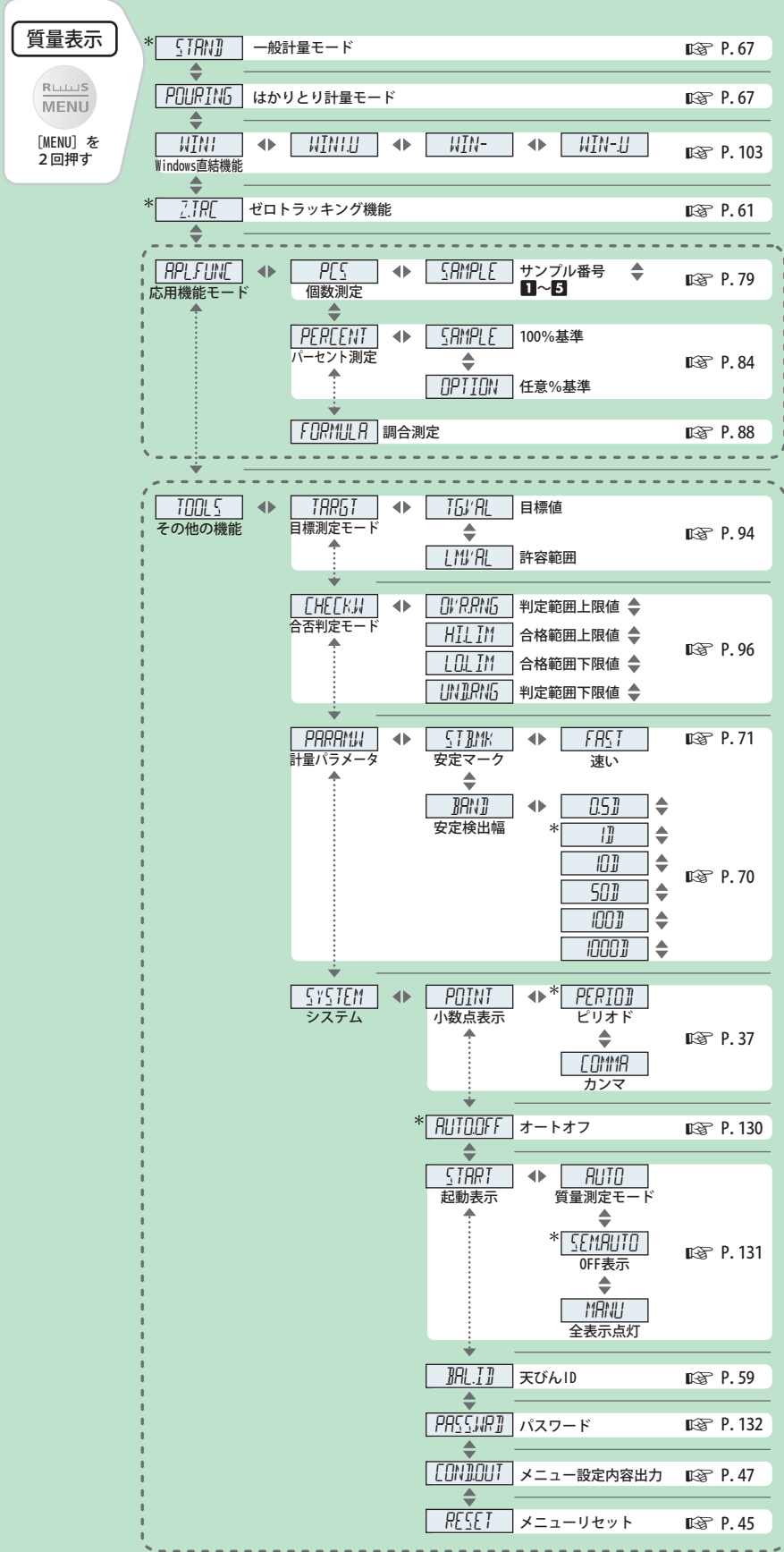


データ出力メニュー

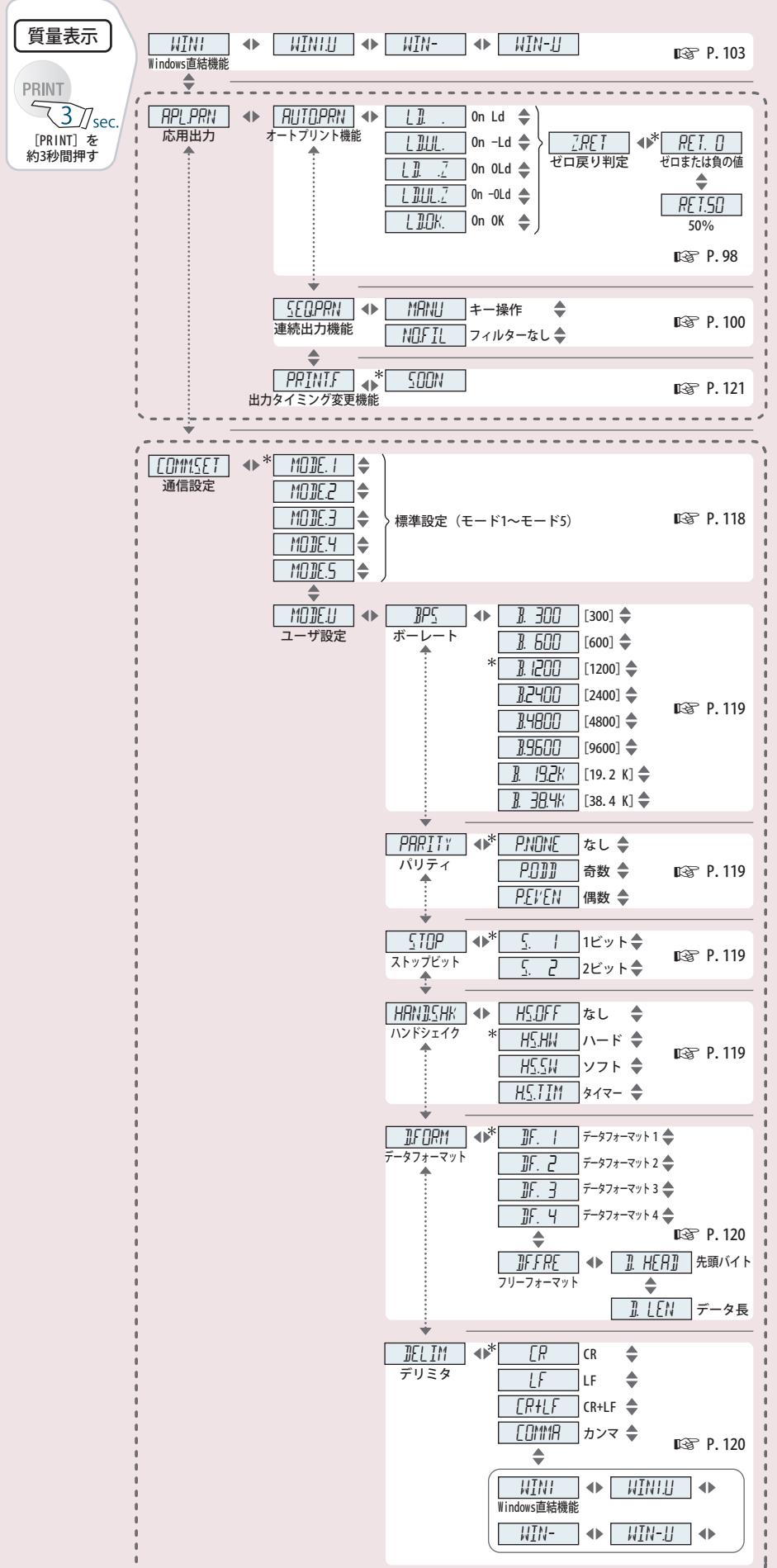


単位登録メニュー

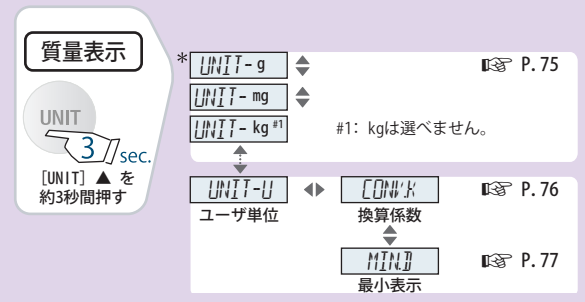


感度校正メニュー

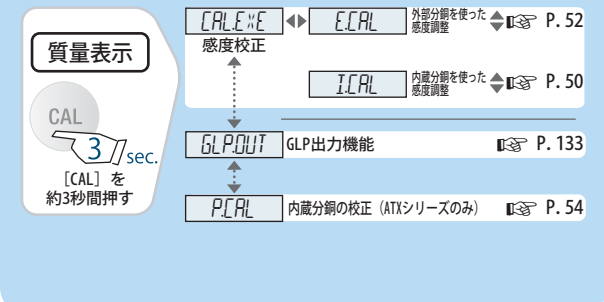

ゼロ/風袋引きメニュー

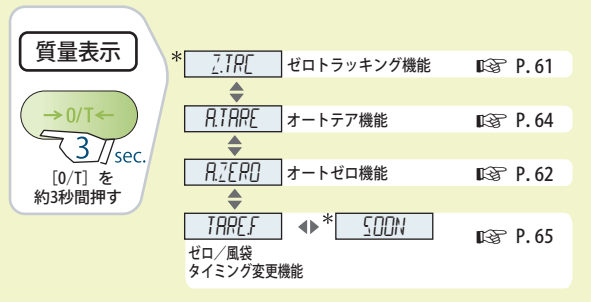


操作部

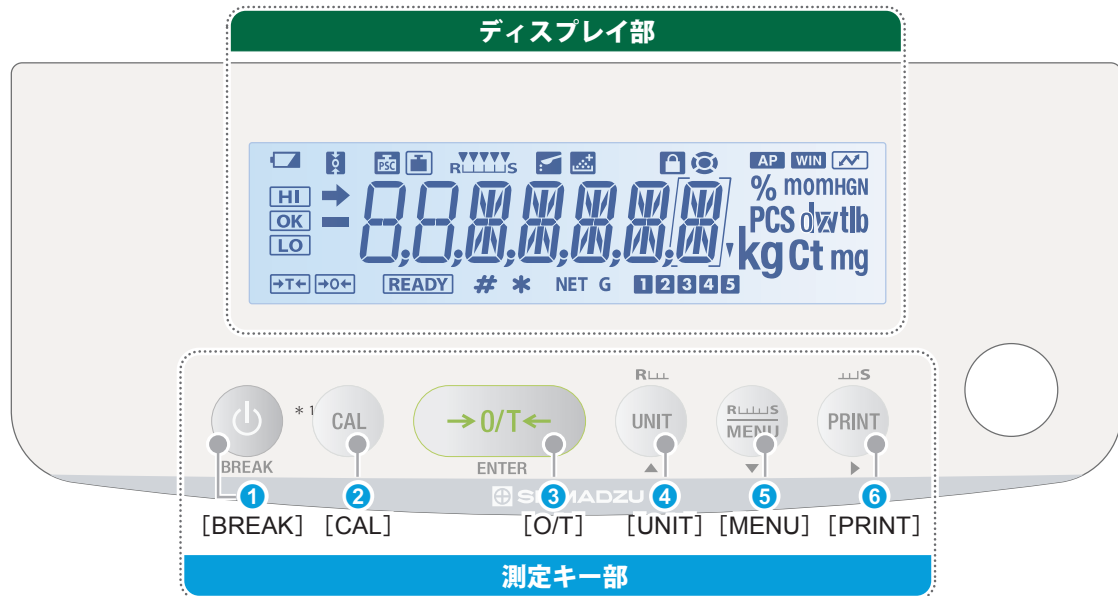

測定キー部

No.	キー名称	短く押すと…	押し続けると… (約3秒間)
1	[BREAK]	起動/スタンバイモードの切り替え	—
2	[CAL]	感度校正の実行	感度校正メニューに入る
3	[O/T]	風袋引き(ゼロ設定)の実行	ゼロ/風袋引きメニューに入る
4	[UNIT] ▲	<ul style="list-style-type: none"> 質量測定モード時：単位の切り替え 個数測定時：単重値の表示 パーセント測定時：基準質量の表示 	<ul style="list-style-type: none"> 質量測定モード時：単位登録メニューに入る 個数測定時：サンプル番号の切り替え パーセント測定時：パーセント基準の切り替え
5	[MENU] ▼	スマートセッティングモードオン	質量測定モードと応用機能モードの切り替え
6	[PRINT] ▶	計量値を外部機器 (プリンタやパソコン) へ出力	データ出力メニューに入る

ディスプレイ部

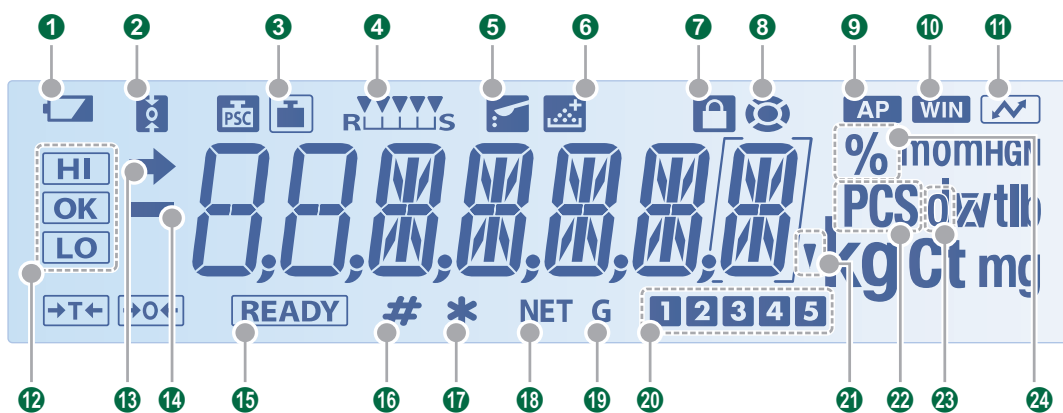

No.	表示	名称	説明	参照
1		電池マーク	電源電圧レベルが低下すると点灯します。	—
2		ゼロトラッキングマーク	ゼロトラッキング機能が設定されているときに点灯します。	P.61
3		分銅マーク	感度校正の実行中に点灯します。	P.48
4		スマートセッティングインジケータ	応答性・安定性が、現在のレベルに調整されているかを示します。	P.68
5		はかりとりマーク	はかりとり計量モードが設定されているときに点灯します。	P.67
6		調合測定マーク	調合測定 (フォーミュレーション) の動作中に点灯します。	P.88
7		メニューロックマーク	メニューをロックしているときに点灯します。	P.46
8		メニュー操作キーマーク	中央の●が表示されているときは、現在表示中のメニュー項目は確定操作が必要であることを示します。左右の円弧が表示されているときは、上位/下位のメニュー階層が存在することを示します。上下の円弧が表示されているときは、他のメニュー項目が選択可能であることを示します。	P.41

No.	表示	名称	説明	参照
9		オートプリントマーク	オートプリント機能が設定されているときに点灯します。	P.100
10		Win マーク	Windows 直結機能が設定されているときに点灯します。	P.104
11		通信マーク	外部機器とのデータ通信中を示します。	—
12		コンパレータマーク	コンパレータ機能が設定されているときに、その判定状態を表示します。	P.94
13		安定マーク	測定値が安定しているとき、またメニュー設定に現在設定している項目が表示されているときに点灯します。	P.42 P.70
14		マイナスマーク	計量値が負の状態のときに点灯します。	—
15		レディマーク	スタンバイモード中に点灯します。また、測定中でも調合機能などの測定レディ状態のときに点灯します。	P.39 P.88
16		数値入力マーク	数値の入力が可能になるときに点灯します。	P.43
17		ホールド表示マーク	リアルタイムの質量値ではない数値 (たとえば個数測定の単重値表示など) が表示されているときに点灯します。	P.82 P.87
18		正味量マーク	調合測定 (フォーミュレーション) 時に表示されている計量値が、風袋容器の質量を除いた正味量であることを示します。また、計量作業中であることも示します。	P.89
19		総量マーク	調合測定 (フォーミュレーション) 時に表示されている計量値が、風袋容器の質量を除いた各配合要素質量の総量であることを示します。	P.89
20		サンプル番号マーク	個数測定時のサンプル番号を示します。	P.82
21		三角マーク	ユーザ単位の任意設定で換算係数の小数点位置を変更するときに点灯させると、小数点なしの数値を入力できます。	P.44
22		個数測定マーク	個数測定中に点灯します。	P.82
23		任意パーセント測定マーク	パーセント測定の任意%基準が設定されているときに、点灯します。	P.86
24		パーセント測定マーク	パーセント測定中に点灯します。	P.87