


DNA精製はもう不要です!

研究用試薬

Ampdirect® Plus 酵素セット

ノックアウトマウスのジェノタイピングや植物DNAマーカーの検出他,PCR操作を負担に感じることはありませんか? DNA精製不要のPCR試薬,Ampdirect® Plus酵素セットは,皆様のご負担を劇的に軽減いたします。この機会にぜひお試しください。

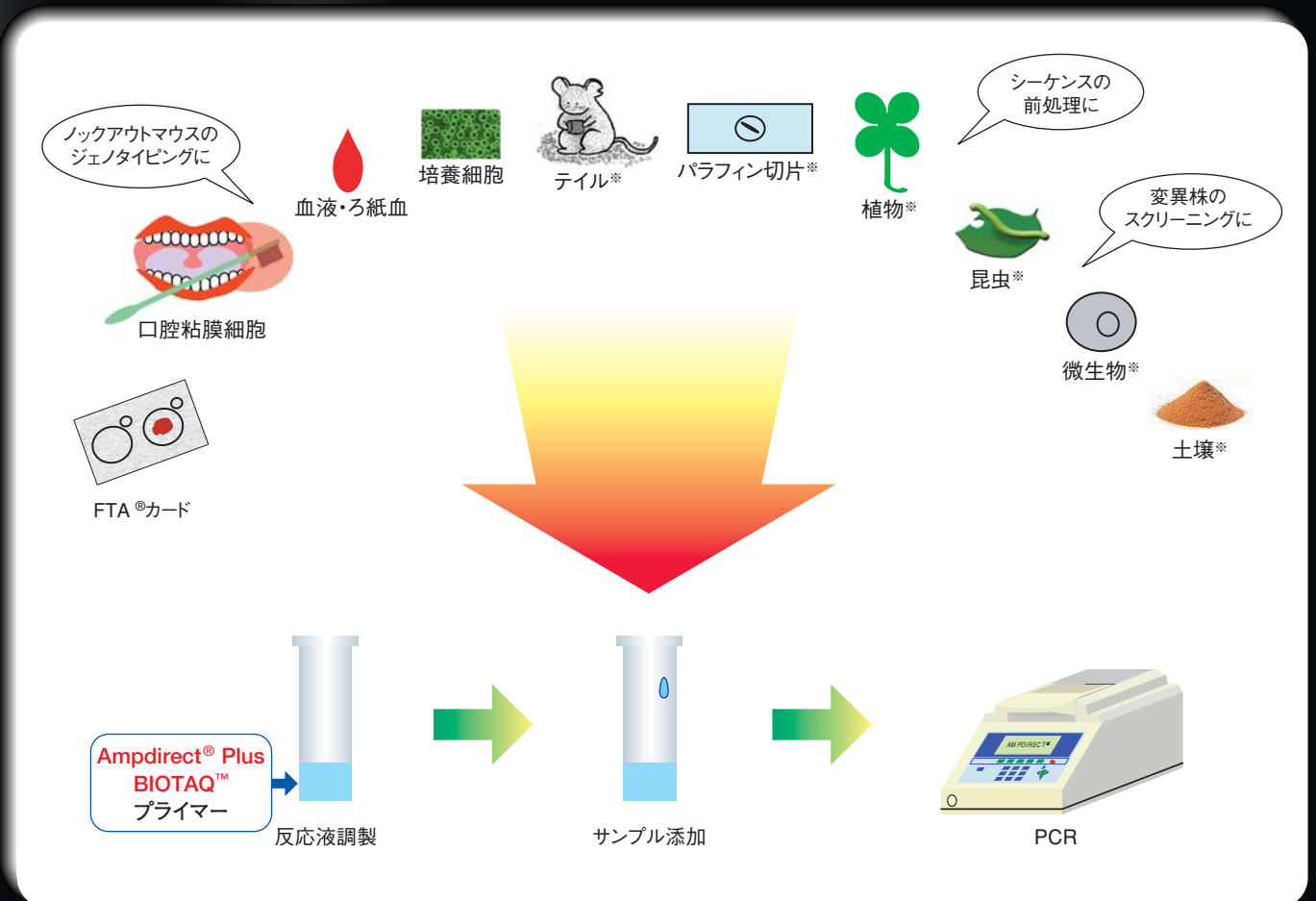

*SDS-Proteinase K 溶液による溶解処理後,反応液に添加しました。

■簡便・迅速

DNA精製が不要になり,簡便かつ迅速なPCRが可能になります。

■微量サンプルに最適

DNA精製が不要なため,精製時のサンプルロスがなく,微量サンプルからのPCRに最適です。

■安定したPCRに

サンプル中の夾雑物によるPCR阻害を受けにくくなり,安定したPCRが可能になります。

■ホットスタート用酵素

便利で高性能なホットスタート用 Taq Polymerase を採用しております。

■シーケンス,フラグメント解析に


増幅産物は,シーケンスやRFLPなどのフラグメント解析に使用可能です。

■低コスト

DNA抽出キットや装置は不要となり,ランニングコストを抑えることが可能となります。

Ampdirect® の原理

Ampdirect®はサンプル中のタンパク質や糖といったPCR阻害物質に対する中和作用をもつため、DNA精製なしにサンプルから直接PCRやクールドな状態からのPCRが可能になります。

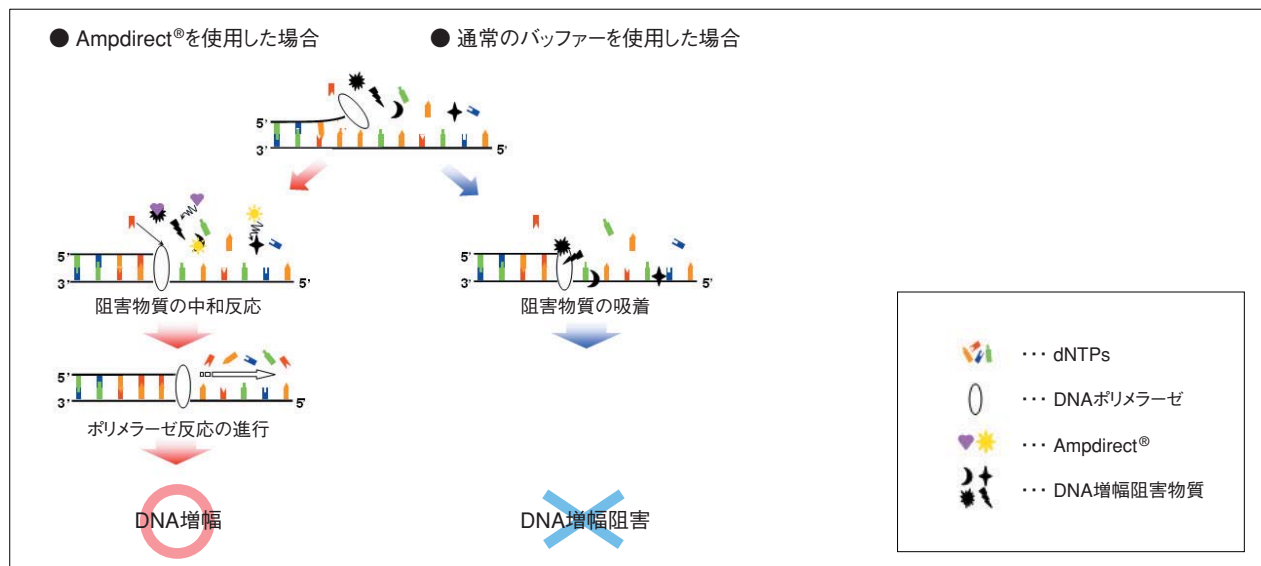

Ampdirect® Plus 酵素セット (P/N 241-08890-92)

- キット内容 ・ Ampdirect® Plus (MgCl₂, dNTP含む) 1mL×5本
- ・ BIOTAQ™ HS DNA Polymerase 250units (5units/μL)

■反応回数：500回分 (20μL反応系)

■保存温度：-20℃

■価格：35,000円 (税別)

単品で、Ampdirect® Plus 1mL×5本 (P/N 241-08800-98・価格25,000円) もございます。



技術に関する
お問合せは…

(株)島津製作所 分析計測事業部 バイオ・臨床ビジネスユニット

〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1
TEL (075) 823-1351 FAX (075) 823-1364

<https://solutions.shimadzu.co.jp/form/ana/bio-contact.htm>

各種アプリケーション、キャンペーン情報は

<http://www.an.shimadzu.co.jp/bio/reagents/amp/index.htm>

皆さまのプロトコール掲載しています Ampdirect®情報サイト「あんぷな部屋」開設しました!

<http://www.shimadzu-amp.jp/>

あんぷな部屋

検索

注) 当製品は研究用試薬です。医療、臨床診断の目的では使用できません。
人、動物の診断・治療用として承認されていませんので、医療品、化粧品、食品など他の用途で
人、動物の身体に直接使用できません。

※価格は2010年4月1日現在のものです。

※価格には、消費税は含まれておりません。

※仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



本社地区事業所認証取得

⊕ 島津製作所

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

東京支社 (03)3219-5631(官公庁)・5616(大学)・5685(会社) 関西支社 (06)6373-6541(官公庁・大学)・6556(会社)
札幌支店 (011)205-5500 東北支店 (022)221-6231 郡山営業所 (024)939-3790
つくば支店 (029)851-8511(官公庁・大学)・8515(会社) 北関東支店 (048)646-0095(官公庁・大学)・0081(会社)
横浜支店 (045)312-4421(官公庁・大学)・311-4615(会社) 静岡支店 (054)285-0124
名古屋支店 (052)565-7521(官公庁・大学)・7531(会社) 京都支店 (075)823-1604(官公庁・大学)・1603(会社)
神戸支店 (078)331-9665 岡山営業所 (086)221-2511 四国支店 (087)823-6623
広島支店 (082)248-4312 九州支店 (092)283-3332(官公庁・大学)・3334(会社)

取次店