


DNA精製はもう不要です!

研究用試薬

Ampdirect® Plus 酵素セット

ノックアウトマウスのジェノタイピングや植物DNAマーカーの検出他、PCR操作を負担に感じることはありませんか? DNA精製不要のPCR試薬、Ampdirect® Plus酵素セットは、皆様のご負担を劇的に軽減いたします。この機会にぜひお試しください。

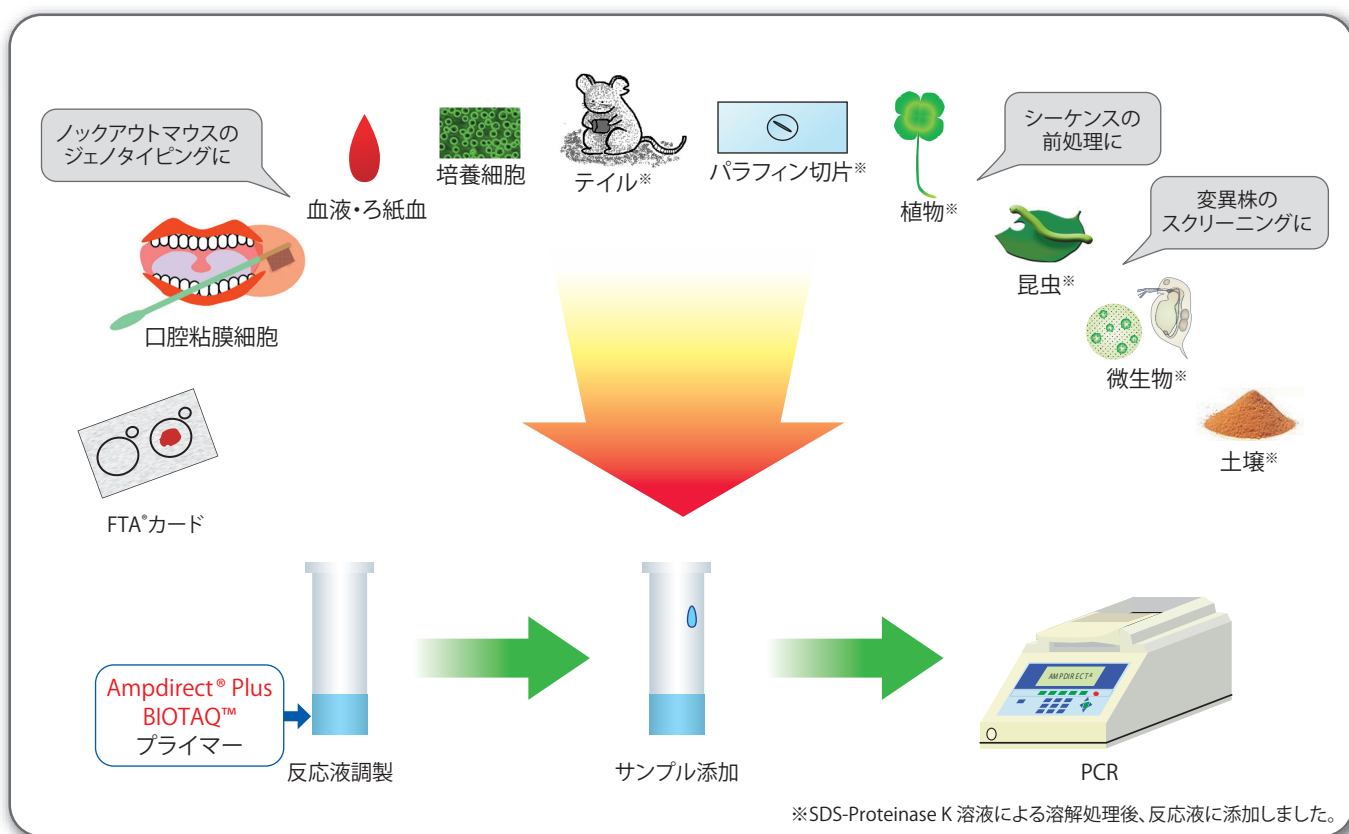

■ 簡便・迅速

DNA精製が不要になり、簡便かつ迅速なPCRが可能になります。

■ 微量サンプルに最適

DNA精製が不要なため、精製時のサンプルロスがなく、微量サンプルからのPCRに最適です。

■ 安定したPCRに

サンプル中の夾雑物によるPCR阻害を受けにくくなり、安定したPCRが可能になります。

■ ホットスタート用酵素

便利で高性能なホットスタート用Taq Polymeraseを採用しております。

■ シーケンス、フラグメント解析に


増幅産物は、シーケンスやRFLPなどのフラグメント解析に使用可能です。

■ 低コスト

DNA抽出キットや装置は不要となり、ランニングコストを抑えることが可能となります。

Ampdirect® の原理

Ampdirect®はサンプル中のタンパク質や糖といったPCR阻害物質に対する中和作用をもつため、DNA精製なしにサンプルから直接PCRやクールドな状態からのPCRが可能になります。

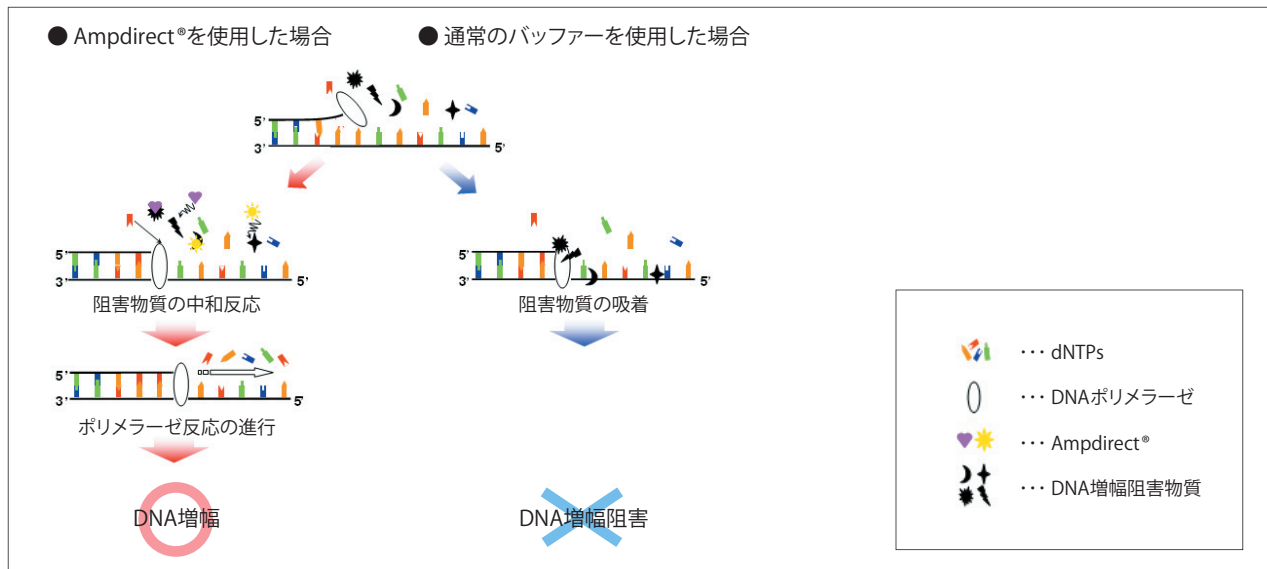

Ampdirect® Plus 酵素セット (P/N 241-08890-92)

- キット内容
 - ・ Ampdirect® Plus (MgCl₂, dNTP含む) 1 mL×5本
 - ・ BIOTAQ™ HS DNA Polymerase 250 units (5 units / μL)

■反応回数：500回分 (20 μL反応系)

■保存温度：-20℃

■価格：35,000円 (税別)



単品で、Ampdirect® Plus 1 mL×5本 (P/N 241-08800-98・価格25,000円) もございます。

技術に関する
お問合せは…

(株) 島津製作所 分析計測事業部 バイオ・臨床ビジネスユニット

〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1
TEL (075) 823-1351 FAX (075) 823-1364

注) 当製品は研究用試薬です。医療、臨床診断の目的では使用できません。
人、動物の診断・治療用として承認されていませんので、医療品、化粧品、食品など他の用途で
人、動物の身体に直接使用できません。

Ampdirect® Plus サイト
<http://www.an.shimadzu.co.jp/bio/reagents/amp/index.htm>



本社地区事業所認証取得

株式会社 島津製作所

外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

- 東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3
(03) 3219-(官公庁担当) 5631・(大学担当) 5616・(会社担当) 5685
- 関西支社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階
(06) 6373-(官公庁・大学担当) 6541・(会社担当) 6556
- 札幌支店 060-0005 札幌市中央区北五条西6丁目2-2 札幌センタービル8階 (011) 205-5500
- 東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 (022) 221-6231
- 郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024) 939-3790
- つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1
(029) 851-(官公庁・大学担当) 8511・(会社担当) 8515
- 北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1丁目41 明治安田生命大宮吉敷町ビル8階
(048) 646-(官公庁・大学担当) 0095・(会社担当) 0081
- 横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階
(045) 312-(官公庁・大学担当) 4421・(会社担当) 311-4615
- 静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川12丁目1-1 伊伝静岡駅南ビル2階 (054) 285-0124

- 名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階
(052) 565-(官公庁・大学担当) 7521・(会社担当) 7531
- 京都支店 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1
(075) 823-(官公庁・大学担当) 1604・(会社担当) 1603
- 神戸支店 650-0034 神戸市中央区京町7-0 松岡ビル8階 (078) 331-9665
- 岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3番10号 住友生命岡山ニューシティビル6階 (086) 221-2511
- 四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6番1号 住友生命高松ビル9階 (087) 823-6623
- 広島支店 730-0036 広島市中区袋町4-25 明治安田生命広島ビル15階 (082) 248-4312
- 九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-2-0 島津博多ビル4階
(092) 283-(官公庁・大学担当) 3332・(会社担当) 3334

島津コールセンター (操作・分析に関する電話相談窓口) ☎ 0120-131691
(075) 813-1691

<http://www.an.shimadzu.co.jp/>

