

研究用試薬


Ampdirect™ Technology
ノロウイルス
拭取り検査用試薬キット

環境中のノロウイルスを
簡便・迅速・高感度に検出!


- 専用濃縮液を新規開発。短時間でノロウイルスを濃縮します。
- 濃縮ウイルスは加熱処理のみで使用可能。手間のかかるRNA抽出操作は不要です。
- 厚生労働省通知法記載のPCRプライマー・プローブを採用。高感度に検出します。




従来法との比較

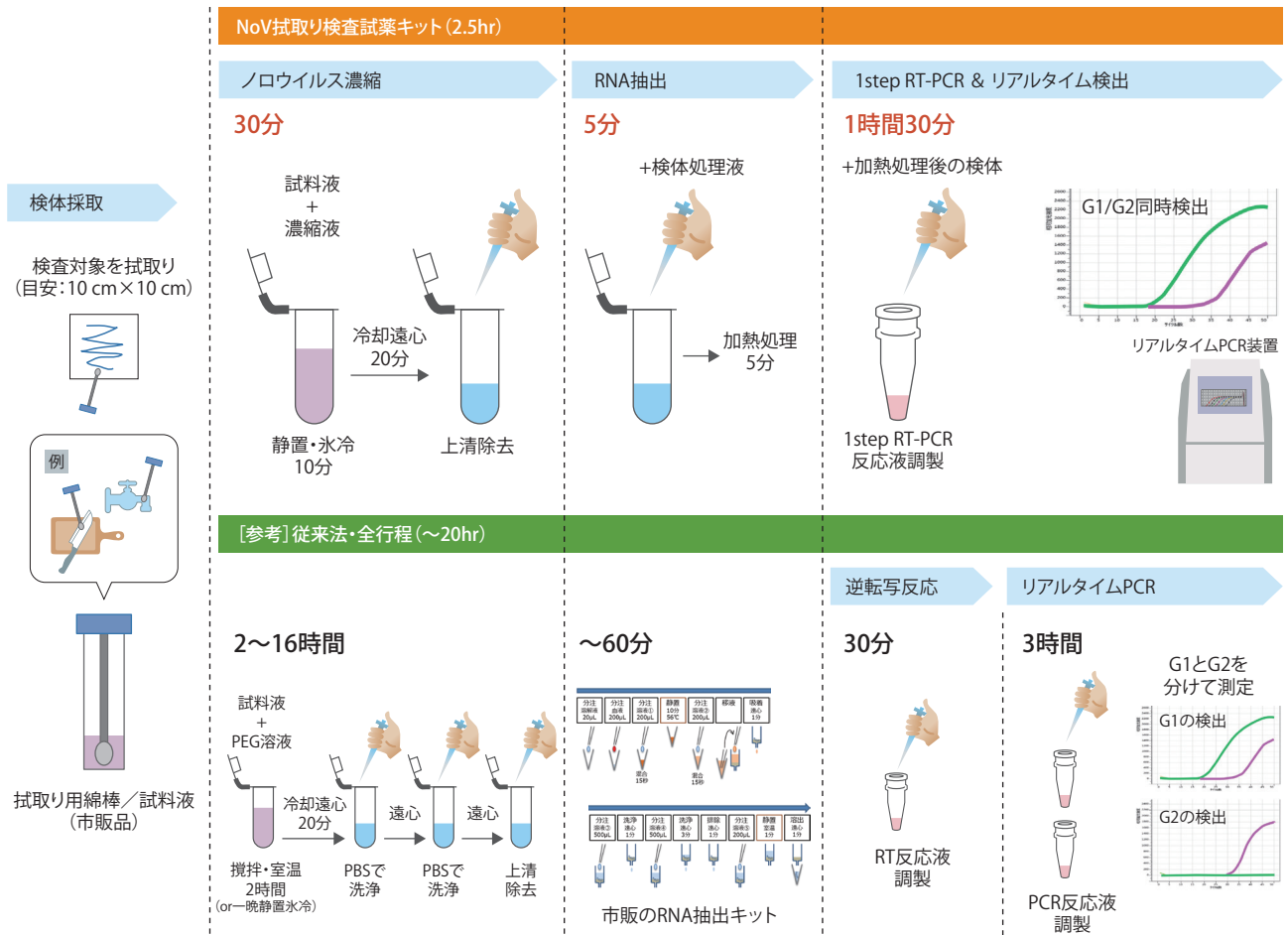

ノロウイルス拭取り検査用試薬キットの実施例

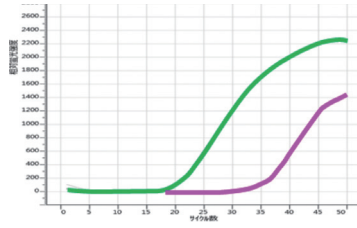

ノロウイルス陽性検体

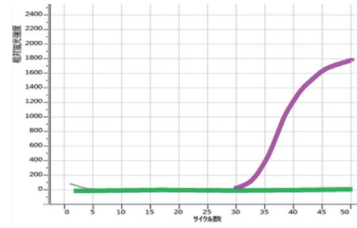

ノロウイルス陰性検体

— G1またはG2 (FAM)
— 内部コントロールDNA (ROX)

遺伝子検出装置GVP-9600取得データ

鳥津ノロウイルス検出システム



ノロウイルス拭取り検査用試薬キット

- ・煩雑な通知法と比較し、簡便・高感度にノロウイルスを検出
- ・内部コントロールによる偽陰性防止

拭取り検査用試薬キット

総合的なノロウイルス対策

検便検査用試薬キット

- ・Ampdirectテクノロジー適用による簡単な検体処理 (RNA抽出・精製不要・熱処理のみ)
- ・検査用途 (スクリーニングやタイピング) にあわせて選べる試薬
- ・内部コントロールによる偽陰性防止



ノロウイルス検出試薬キットラインナップ

製品情報

品名	P/N	備考
ノロウイルス拭取り検査用試薬キット	241-09260-91	使用回数: 100回、保存温度: -20℃

■ 姉妹品 (研究用試薬: 検便検査用試薬キット)

品名	P/N	備考
1step RT-PCRノロウイルスG1&G2検出試薬キットVer.2	241-09500-91	使用回数: 48回、保存温度: -20℃
ノロウイルス検出試薬キット Ver.2 - 2色	241-09765-91	2色蛍光フィルター用、使用回数: 100回、保存温度: -20℃
ノロウイルス検出試薬キット Ver.2 - 3色	241-09765-92	3色蛍光フィルター用、使用回数: 100回、保存温度: -20℃

- ・十分な検証を行ってから、ご使用ください。
- ・本製品の購入者は、本製品を商業目的を含む用途に使用できません。

Ampdirectは、株式会社鳥津製作所またはその関係会社の日本およびその他の国における商標です。

本文中に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。本製品は研究用です。医薬品医療機器法に基づく体外診断用医薬品あるいは医療機器として承認・認証等を受けておりません。治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 鳥津製作所

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3
(03)3219-(官公庁担当) 5631・(大学担当) 5616・(会社担当) 5622

関西支社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階
(06)6373-(官公庁・大学担当) 6541・(会社担当) 6556

札幌支店 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目8-1 札幌北ビル9階 (011)700-6605

東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 (022)221-6231

郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024)939-3790

つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1
(029)851-(官公庁・大学担当) 8511・(会社担当) 8515

北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷町ビル8階
(048)646-(官公庁・大学担当) 0095・(会社担当) 0081

横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階
(045)311-(官公庁・大学担当) 4106・(会社担当) 4615

静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川1丁目1-1 伊伝静岡駅前ビル2階 (054)285-0124

名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階
(052)565-(官公庁・大学担当) 7521・(会社担当) 7531

京都支店 604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1
(075)823-(官公庁・大学担当) 1604・(会社担当) 1603

神戸支店 650-0033 神戸市中央区江戸町9-3 栄光ビル9階 (078)331-9665

岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3-10 岡山ニューシティビル6階 (086)221-2511

四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6-1 高松NKビル9階 (087)823-6623

広島支店 732-0057 広島市東区二葉の里3丁目5-7 GRANODE広島5階 (082)236-9652

九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 鳥津博多ビル4階
(092)283-(官公庁・大学担当) 3332・(会社担当) 3334

鳥津コールセンター (操作・分析に関する電話相談窓口) ☎ 0120-131691
IP電話等: (075)813-1691

<https://www.an.shimadzu.co.jp/>