

150
YEARS
ANNIVERSARY

150年の感謝を込めて

材料試験オペレーションソフトウェア
TRAPEZIUM™ X-V
(試験録画オプション付き)

150 セット **限定**
55 ~~79万円~~
万円 (税抜)

2025年3月31日まで


1875 (明治 8) 年に創業した島津製作所は、2025 年に創業 150 周年を迎えます。150 年の感謝の気持ちを込めて、オートグラフ専用「材料試験オペレーションソフトウェア TRAPEZIUMX-V」と「USB カメラ (オプション)」をセットにした、バージョンアップセットを 55 万円で、150 セット限定キャンペーンとしてご用意いたしました。

現在お使いいただいているソフトウェアから、便利な機能が盛りだくさんの最新ソフトウェア TRAPEZIUMX-V にバージョンアップしていただくことにより、利便性が向上すると共に Windows11 への対応が可能になります。更に、付属の USB カメラにより、試験後にサンプルの変形挙動を SS カーブと連動して確認ができ、獲得できる技術情報の拡充に寄与します。PC 更新、OS 変更および設備の利便性向上をご検討の際には、ぜひ本キャンペーンをご活用ください。

キャンペーンセット内容



材料試験オペレーションソフトウェア
TRAPEZIUM™ X-V シングルソフトウェア

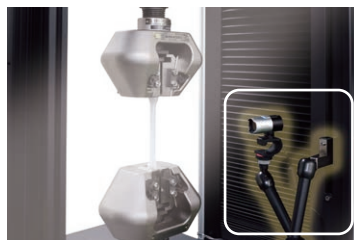

USB カメラ
(試験録画オプション)




ノート PC
※画像はイメージです

※ 特別価格は「標準据付調整費」を含みません。別途、据付調整費が必要です。その他、ご使用にあたって必要な付属品がある場合は別途お見積りいたします。
※ キャンペーンセット内容の詳細はお問い合わせください。

USB カメラ機能で サンプルの変形挙動を SS カーブと連動して確認可能


ポイントピッキング機能と USB カメラの録画機能を組み合わせることにより、SS カーブ上の任意の点におけるサンプルの変形状態が確認できます。例えばプラスチック試験片のネッキング開始が SS カーブ上のどこから開始したのか、自動車部品に負荷を加えている過程で急激に試験力が低下した際に部品がどのように変形していたかなど、SS カーブだけでは分からないことが把握できます。

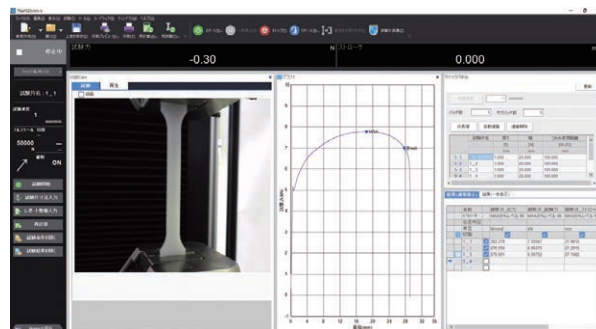

試験中でも別データの解析可能

TRAPEZIUMX-V で試験をしている間に、もう一つの TRAPEZIUMX-V をオフラインで起動することができます。試験中に別データの試験条件を作成したり、試験結果を再解析可能なため、作業効率の向上に寄与します。

試験機とオンラインでの試験状況を確認

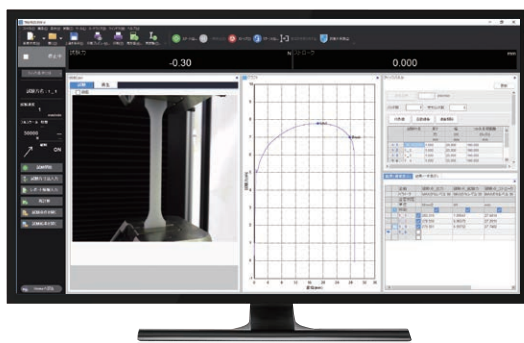

TRAPEZIUMX-V を
同時に 2 つ起動
試験中に別試験の
条件作成や結果再解析が可能




オフラインで別試験の条件作成や結果再解析



新型恒温槽 TCE を TRAPEZIUMX-V で制御可能

新型恒温槽 TCE の温度設定が可能です。また、温度データを他のデータと連動して記録することが可能です（恒温槽はオプションとなります）。

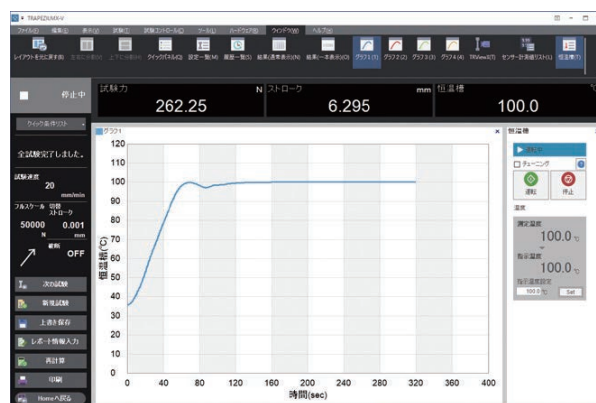

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。