

**150**  
YEARS  
ANNIVERSARY

\\ 150周年キャンペーン 第2弾 //

ICP 質量分析計

**ICPMS-2040**

**1,500** (税抜) 万円

2025年12月末まで


1875 (明治 8) 年に創業した島津製作所は、2025年に創業150周年を迎えました。150年の感謝の気持ちを込めて、ICP 質量分析計「ICPMS-2040」を特別価格1,500万円 (税抜) でご用意いたしました。

ICPMS-2040本体、PC・ソフトウェア、オートサンプラ、冷却水循環装置に加えて、測定の効率化・無人化に貢献する“内標準自動添加キット”および“溶液切替バルブ”が付属した充実のセット内容です。既設置のご更新や初めてのICP-MSのご導入にも、ぜひ本キャンペーンをご活用ください。



ICP 質量分析計 **ICPMS-2040**

## キャンペーンセット内容

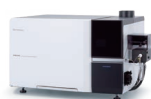

ICPMS-2040 本体  
(ロータリーポンプ含む)



※画像はイメージです

PC、液晶モニター、  
ソフトウェア



オートサンプラ  
AS-20



冷却水  
循環装置






内標準  
自動添加キット



溶液切替  
バルブ

※ 特別価格は「標準据付調整費」を含みません。別途、据付調整費が必要です。その他、ご使用にあたって必要な付属品がある場合は別途お見積りいたします。  
※ キャンペーンセット内容の詳細はお問い合わせください。

# ICPMS-2040 の特長

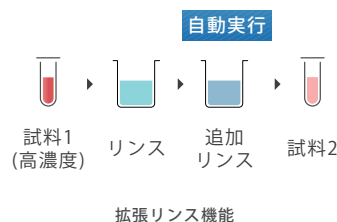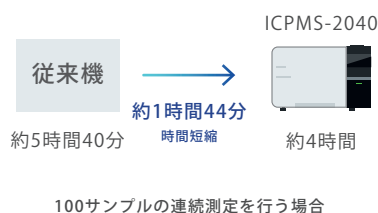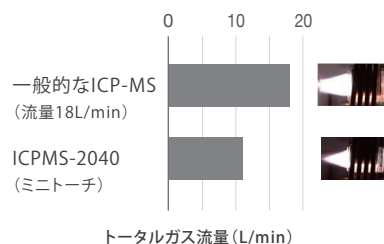

## 低ランニングコスト

島津独自のミニトーチシステムは、通常のプラズマトーチに比べ、アルゴンガス消費量を約 2/3 (11 L/min) に低減しています。また、低価格な工業用アルゴンガス (99.99 %) が使用できるため、大幅なコスト削減に貢献します。

## 測定時間を大幅に短縮


新設計ガスコントローラによる高速セルガス置換、および先行リンス機能により、特別なオプションを使用することなく測定時間を大幅に短縮できます。

※ 測定時間の短縮効果は測定条件により異なります。

## オペレーターの負担低減

指定した元素の定量値が上限を超えた場合に事前に設定した追加リンスを自動実行する機能です。これにより、オペレーターはキャリーオーバーが発生していないかを都度確認する必要がなくなります。

## 溶液切替バルブ — プラズマ点灯以降の無人運転を実現 —

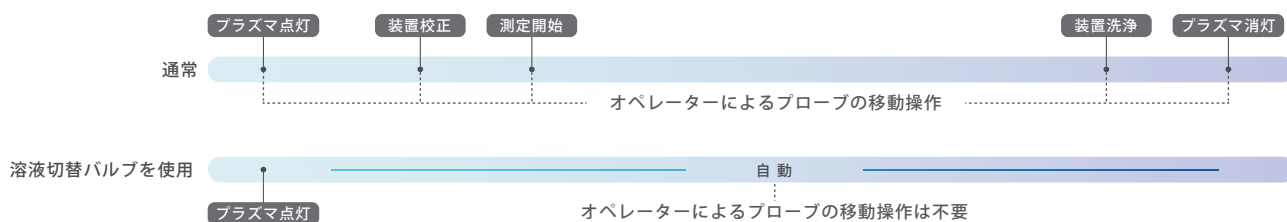

溶液切替バルブにより、オンラインで内標準自動添加を行う際の各プローブの移動（溶液の切り替え）を自動化できます。これにより、オペレータは試料セットおよびプラズマ点灯を行った後は装置を操作する必要がなく、装置校正から測定、装置洗浄、プラズマ消灯、チャージ停止までを装置が自動で行います。

## ドライポンプ仕様にアップグレード可能

ターボ分子ポンプのバックポンプおよびインターフェース部の排気用として使用しているロータリーポンプを、ドライポンプに変更できます。オイル交換が不要で、また、オーバーホールの周期もロータリーポンプの3年に対してドライポンプは5年となるため、メンテナンスコストを削減できます。



特設サイトには他のキャンペーン対象機種も多数掲載！  
お問い合わせはこちら！

島津150周年記念キャンペーン



本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。  
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。  
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証を受けておりません。  
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。  
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。  
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。