

\\ 150周年キャンペーン 第2弾 //

150
YEARS
ANNIVERSARY

電子天びんが 150台限定 特価&特典

2025年12月末まで



※画像は AP225WD-AD

1875（明治 8）年に創業した島津製作所は、2025 年に創業 150 周年を迎えます。150 年の感謝の気持ちを込めて、電子天びん「AP/AP W-AD シリーズ」を対象にそれぞれ 150 台限定でお得な特典をご用意いたしました。別売のイオナイザを内蔵できる汎用モデルの AP シリーズと、「オートドア」「イオナイザ」「タッチレスセンサ」を標準搭載したハイエンドモデル AP W-AD シリーズはスピーディで信頼性の高い計量を実現しました。電子天びんの新規導入や更新に、ぜひ本キャンペーンをご検討ください。

AP シリーズ セットで 30%OFF

AP シリーズとイオナイザ STABLO-AP の同時購入で特別価格でご提供いたします。 ※ 価格は裏面をご参照ください。



AP シリーズ



イオナイザ STABLO-AP



電子天びん AP に
内蔵できます



AP W-AD シリーズ 選べる特典 ABC

AP W-AD シリーズをご購入の方に、ご希望の特典をおひとつプレゼントいたします。



AP W-AD シリーズ



A
保証期間の延長
(12ヶ月→15ヶ月)
※最大 50 台まで



B
スマートホルダ
スマートホルダ
28,300 円 (税抜)
※AP225W-AD には標準付属



C
※画像はイメージです
150 周年ロゴ入り
真空断熱ボトル
500ml



特典のお申込みは
製品納品後
こちらから！

※ その他、ご使用にあたって必要な付属品がある場合は別途お見積りいたします。

※ キャンペーンセット内容の詳細はお問い合わせください。

AP シリーズ + STABLO-AP セット 特別割引 30%OFF

※ 校正分銅内蔵モデルです。

形名	AP225W STABLO-AP	AP135W STABLO-AP	AP225WD STABLO-AP	AP125WD STABLO-AP	AP324W STABLO-AP	AP224W STABLO-AP	AP124W STABLO-AP	AP324X STABLO-AP	AP224X STABLO-AP	AP124X STABLO-AP
セット価格 (税抜)	¥1,023,000 ¥716,100	¥645,000 ¥451,500	¥617,000 ¥431,900	¥542,000 ¥379,400	¥479,000 ¥335,300	¥439,000 ¥307,300	¥399,000 ¥279,300	¥412,000 ¥288,400	¥358,000 ¥250,600	¥332,000 ¥232,400
ひょう量	220g	135g	220g / 102g	120g / 52g	320g	220g	120g	320g	220g	120g
最小表示	0.01mg		0.1mg / 0.01mg		0.1mg				0.1mg	

High Speed & Stress Free

島津が誇る一体型質量センサUniBlocをさらに進化させました。弊社従来機種から応答時間を約5分の1に短縮。また、別売のイオナイザSTABLO-APをお客様で内蔵させることが可能で、スピーディで正確な計量を実現しました。



静電気でアンプルにサンプルがなかなか入らない!



アンプルの入り口や側面に付着して扱いづらい。



STABLO-AP (イオナイザ) でアンプルを除電。



数秒で除電完了。作業効率もアップ。

● 分析天びんで測定するときはSTABLO-AP (イオナイザ) が便利!



シャーレ内の粉が帯電して数値がふらつく場合



薬包紙が帯電し、数値が不安定な場合



計量スプーンが帯電し、近づけただけで数値が動く場合

イオナイザ
STABLO-AP
¥ 92,000 (税抜)



AP W-AD シリーズ

※ 校正分銅内蔵モデルです。

形名 P/N	W-ADシリーズ					
	AP225W-AD S321-76000-13	AP135W-AD S321-76000-10	AP225WD-AD S321-76000-12	AP125WD-AD S321-76000-11	AP324W-AD S321-76000-03	AP224W-AD S321-76000-02
価格(税抜)	¥1,436,000	¥915,000	¥867,000	¥760,000	¥737,000	¥701,000
ひょう量	220g	135g	220g / 102g	120g / 52g	320g	220g
最小表示	0.01mg		0.1mg / 0.01mg		0.1mg	

動画にて W-AD シリーズの紹介を行っています。

天びん AP 検索



スマートオートドアによる作業性の向上

サンプルやスパチュラを手を持ったまま作業が可能で、測定時間を短縮。

自動学習機能搭載

開閉するガラス扉の設定や開閉範囲を自由に設定可能



自由に選べる3つの開閉方法

- 1 左右の赤外線センサでタッチレス開閉
- 2 左右のボタンで開閉
- 3 手動トリガ機能で開閉

タッチレスセンサによる衛生的な計量作業

本体に触れずに操作が可能。感染対策や有害物質の取扱いに役立ちます。

マルチファンクションモードの搭載

左右の赤外線センサに手をかざす時間によって計4種類の機能を登録することができます。

【登録できる機能】

キー名称	機能
A/V	ドア開閉
計量値出力	計量値出力
風袋引き	風袋引き
イオン照射	イオン照射



両タッチレス(長かざし)で機能設定状態を確認

イオナイザSTABLO-APを標準搭載


無風タイプの内蔵イオナイザで、サンプルや容器等の静電気を素早く除去。これまで以上に信頼性の高い計量を実現します。

こんな時はイオナイザが役に立ちます

薬包紙が帯電し数値が不安定



粉体サンプルが帯電し数値がふらつく

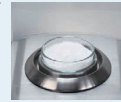

スマートホルダによる作業効率化と計量信頼性向上

スマートホルダ (AP225W-AD/AP225Wのみ標準付属) を使用することにより、メスフラスコなどの容器への直接はかりとりがよりスムーズになります。薬包紙からの移し替え作業を省略できるため、計量作業の効率化だけでなく、移し替え時のコンタミネーションを防ぐことができます。

→ スマートホルダと内蔵イオナイザの組み合わせで容器の除電をより効果的に行えます。

スマートホルダで使用可能な容器(例)

容器	容量の目安*
メスフラスコ	10~100 mL
三角フラスコ	100 mL
ビーカー	
遠沈管	3~25 mL
試験管	

※ 約70 mm以上の高さ、または長さが必要です。



メスフラスコ (100 mL)



スマートホルダ

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
 なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。
 本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。
 治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
 トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

特設サイトには他のキャンペーン対象機種も多数掲載しています！
 お問い合わせはこちらから！

Q 島津150周年記念キャンペーン



株式会社 島津製作所

分析計測事業部

東京支社 天びん営業課 TEL (03) 3219-5705
 [担当地域 北海道・東北・関東・甲信越・静岡県]

関西支社 天びん営業課 TEL (06) 4797-7277
 [担当地域 北陸・東海(※)・近畿・中国・四国・九州・沖縄]
 ※ 静岡県は東京の天びん営業課の担当です。