

150周年キャンペーン 第2弾 //

150
YEARS
ANNIVERSARY

上皿天びん

UP シリーズ

1500 台限定

特別
割引 **40%** OFF

2025 年 12 月 末 まで



クラス最高の応答性と耐久性

- ・微量計量の表示反応時間がわずか約 1 秒
- ・アルミダイカスト製ボディで薬品に強い
- ・1000 万回の耐久試験評価をクリア
- ・PC 接続可能 (別売ケーブル必要)

1875 (明治 8) 年に創業した島津製作所は、2025 年に創業 150 周年を迎えました。150 年の感謝の気持ちを込めて、上皿天びん「UP シリーズ」を 40% 引きの特別価格でご用意いたしました。ぜひ本キャンペーンをご活用ください。


精密天びんの概念を超えた質量センサ「UniBloc™」



UniBloc は、島津が世界に先駆けて開発したアルミ一体型質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた質量センサです。ひとかたまりのアルミ合金を精密放電加工し、従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。その均一構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化したことにより「耐衝撃性」がアップしました。



UniBloc

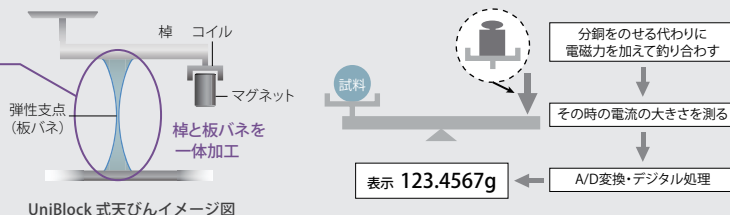

UniBloc 式天びんイメージ図

上皿天びん UP-X シリーズ (分銅内蔵モデル)

形 名	UP223X	UP423X	UP623X	UP823X	UP1023X	UP2202X	UP4202X	UP6202X	UP422X	UP822X	UP4201 X	UP8201X
P/N	S321-74600-01	S321-74600-03	S321-74600-04	S321-74600-05	S321-74600-06	S321-74600-13	S321-74600-15	S321-74600-16	S321-74600-11	S321-74600-12	S321-74600-18	S321-74600-19
価 格 (税 抜)	¥239,000 ¥143,400	¥248,000 ¥148,800	¥282,000 ¥169,200	¥300,000 ¥180,000	¥327,000 ¥196,200	¥239,000 ¥143,400	¥248,000 ¥148,800	¥274,000 ¥164,400	¥203,000 ¥121,800	¥235,000 ¥141,000	¥222,000 ¥133,200	¥261,000 ¥156,600
ひ ょ う 量	220g	420g	620g	820g	1020g	2200g	4200g	6200g	420g	820g	4200g	8200g
最 小 表 示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
さらの大きさ (mm)	約113 (W) × 110 (D)					約176 (W) × 189 (D)			約113 (W) × 110 (D)		約176 (W) × 189 (D)	
所 要 電 源	AC100V 50/60Hz (ACアダプタ) 12VA以下											

上皿天びん UP-Y シリーズ

形 名	UP223Y	UP423Y	UP623Y	UP823Y	UP1023 Y	UP2202Y	UP4202Y	UP6202Y	UP422Y	UP822Y	UP4201 Y	UP8201Y
P/N	S321-74600-21	S321-74600-23	S321-74600-24	S321-74600-25	S321-74600-26	S321-74600-33	S321-74600-35	S321-74600-36	S321-74600-31	S321-74600-32	S321-74600-38	S321-74600-39
価 格 (税 抜)	≪¥190,000 ¥114,000	≪¥203,000 ¥121,800	≪¥216,000 ¥129,600	≪¥229,000 ¥137,400	≪¥256,000 ¥153,600	≪¥190,000 ¥114,000	≪¥203,000 ¥121,800	≪¥210,000 ¥126,000	≪¥157,000 ¥94,200	≪¥177,000 ¥106,200	≪¥164,000 ¥98,400	≪¥177,000 ¥106,200
ひ ょ う 量	220g	420g	620g	820g	1020g	2200g	4200g	6200g	420g	820g	4200g	8200g
最 小 表 示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
さらの大きさ (mm)	約113 (W) × 110 (D)					約176 (W) × 189 (D)			約113 (W) × 110 (D)		約176 (W) × 189 (D)	
所 要 電 源	AC100V 50/60Hz (ACアダプタ) 12VA以下											

※ その他、ご使用にあたって必要な付属品がある場合は別途お見積りいたします。

※ キャンペーン内容の詳細はお問い合わせください。

150周年キャンペーン 第2弾 //

150
YEARS
ANNIVERSARY

水分計

MOC63u

150 台限定

17.4 万円 (税抜)
◀ 24.9 万円 特別割引 30% OFF

2025年12月末まで



1875(明治 8)年に創業した島津製作所は、2025 年に創業 150 周年を迎えました。150 年の感謝の気持ちを込めて、水分計「MOC63u」を 30% 引きの特別価格でご用意いたしました。ぜひ本キャンペーンをご活用ください。

水分率をこれ1台で簡単に素早く測定

- ・ヒータでサンプルを加熱、乾燥し水分率を求めます
- ・乾燥機による乾燥減量法よりも短時間で測定が可能
- ・カバーを閉めるだけで測定開始。イーザーモード搭載
- ・USB コネクタを標準装備し、PC との接続が簡単



シンプルな測定手順！

「イーザー方式」を選択すると試料を入れてヒータカバーを閉めれば、スタートボタンを押さなくても測定開始し、測定までの手順を簡略化できます。



試料皿の大きさは余裕のφ95mm！

一般的にサンプルは「広く・薄く・均一に」ひろげるほど測定精度は高くなります。形状を工夫した反射板を採用することにより、均一な加熱を実現しました。

形 名	MOC63u
P/N	S321-71500-02
ひょう量	最大サンプル量：60g、最小サンプル量：0.02g
最小表示	質量：0.001g、水分率：0.01%
再現性(繰り返し性) ^{※1}	0.15% (2g) 0.05% (5g) 0.02% (10g)
熱源	方式：ハロゲン（直管型）、電力：定格400W
設定温度	50~200℃ (1℃間隔)(180℃を超える設定の場合は1時間まで)
表示部	バックライト付LCD
計量皿寸法	φ95mm
本体寸法 (mm)	約202 (W) × 336 (D) × 157 (H)
価格 (税抜)	¥249,000 ▶ ¥174,300

※1 繰り返し (標準偏差) の値は、標準的な測定 (試料: 酒石酸ナトリウム二水和物) の場合であり、すべての試料、環境、測定条件において保証するものではありません。

※ その他、ご使用にあたって必要な付属品がある場合は別途お見積りいたします。

※ キャンペーン内容の詳細はお問い合わせください。

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。

なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。

本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。

治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。

トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部

東京支社 天びん営業課 TEL (03) 3219-5705

[担当地域 北海道・東北・関東・甲信越・静岡県]

関西支社 天びん営業課 TEL (06) 4797-7277

[担当地域 北陸・東海(※)・近畿・中国・四国・九州・沖縄]

※ 静岡県は東京の天びん営業課の担当です。

特設サイトには他のキャンペーン対象機種も多数掲載！

お問い合わせはこちら！ [Q 島津150周年記念キャンペーン](#)

