


MSイメージングデータ解析ソフトウェア

IMAGEREVEAL™ MS 100日間限定ライセンス

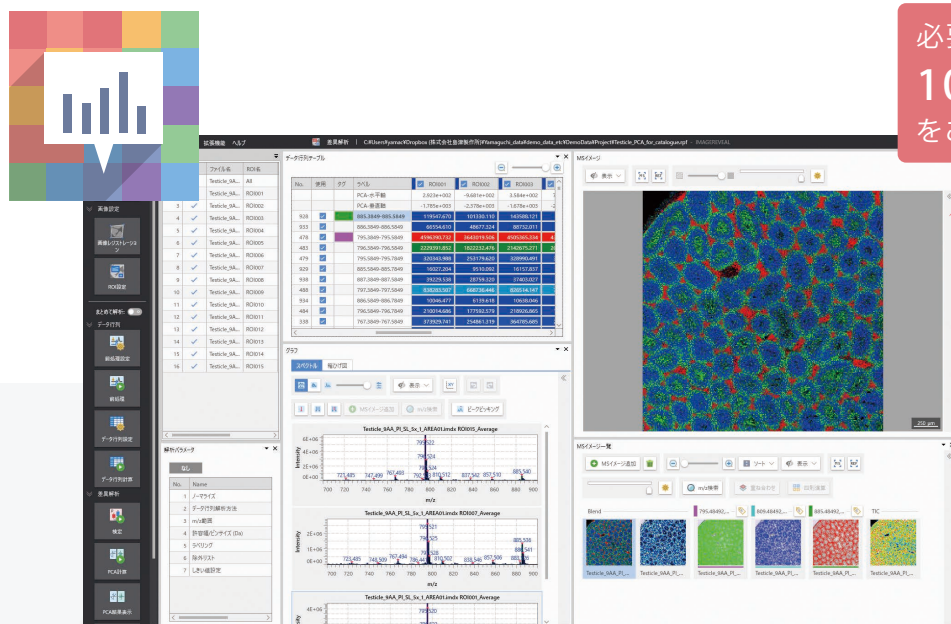

必要な期間だけで使用いただける
100日間限定ライセンス
をご用意しました

MSイメージング分析なら おまかせ

データや時間を無駄にしませんか？
膨大なデータから重要な情報を見つけましょう。
あなたの研究をもっと効率的に。



1 → 2 → 3

最短3ステップで
簡単に解析

差異解析、画像解析では「まとめて解析」機能を使用することができます。日々のルーチンワークに最適です。

多彩な解析モード

最大5つの解析モードから目的に応じた解析方法を選択できます。簡単なワークフローで多角的にデータを解析することができます。

汎用フォーマット
データを解析

付属のデータ変換ツール「IMDX Converter」を用いるとMSイメージングの汎用フォーマットであるImzML、Analyze 7.5 データを解析することができます。




■ ライセンス／機能一覧

ライセンス種別	基本解析	差異解析	画像解析	定量解析	スクリーニング	スクリーニング(定量)
	・MSイメージの作成／閲覧 ・ROI平均スペクトル間の検定など	・ROI間の違いを多変量解(PLS、PCA)で探索	・類似画像抽出 ・類似画像の分類(HCA解析)	・検量線を作成し、濃度値でイメージを表示	・各測定点へのROIの自動設定 ・平均スペクトルの比較による差異解析	・各測定点へのROIの自動設定 ・各測定点で検量線を作成し定量解析
基本ライセンス	○	—	—	○	—	—
フルライセンス	○	○	○	○	○	○
イメージングライセンス	○	○	○	○	—	—

■ 対応フォーマット

付属の「IMDX Converter」で、本ソフトウェアで読み込み可能な“imdx”形式に変換することができます。

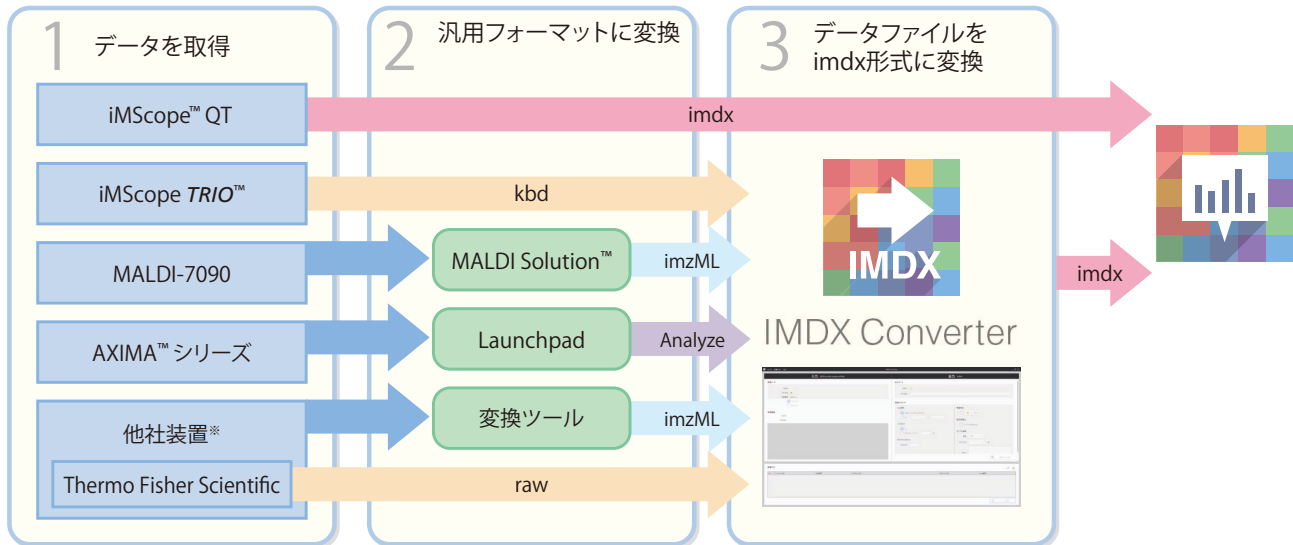

※すべての他社装置データの変換を保証するものではありません。変換データの実績については製品紹介Webでご確認ください。

■ パッケージ内容

- ・IMAGEREVEAL MS 100日間限定ライセンス:1本(追加購入により100日単位で再開可能。作成済みデータも解析可能)
- ・インストールDVD(電子版取扱マニュアル)

■ デモ版のダウンロード <https://www.an.shimadzu.co.jp/bio/imagerreveal/download.htm>

IMAGEREVEAL MS フル機能版の、すべての機能を30日間使用できるデモ版をご用意しています。



■ 注意事項

- ・快適にご使用いただくために、下記以上のスペックを持つPCを推奨します。
PCスペック:インテル® Core™ i7または Xeon®以上、RAM:32GB以上 動作確認OS:Windows®10 Pro 64ビット版 日本語または英語
- ・当該ライセンスは電子ライセンスで提供されます。ライセンス有効化の手続き時、インターネットにアクセスできる端末が必要です。
- ・ソフトウェア使用期限は、アクティベート(ライセンスの有効化)から100日です。
- ・保証期間(媒体不具合、乱丁、欠品等の物理的な不具合に対する保証期間)は、引き渡しから1年、もしくはアクティベートから100日のいずれか早い日です。
- ・ソフトウェアバグ等に対する修正プログラム提供期限は、引き渡しから1年、もしくはアクティベートから100日のいずれか早い日です。
- ・期限途中で中断することや、ライセンスを別のPCに移すことはできません。PC1台でのアクティベートをもって100日の期限がスタートします。使用の有無に関係なく、アクティベートから100日をもってライセンスが消滅しますので、ご注意ください。
- ・使用開始後、期限途中の解約、返品、返金はできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・当該ライセンスは有償、無償を問わず、第三者に販売、頒布、貸与、譲渡等、または再使用許諾することはできません。

IMAGEREVEAL、iMScope、iMScope TRIO、AXIMAおよびMALDI Solutionは、株式会社島津製作所またはその関係会社の日本およびその他の国における商標です。
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
インテル、Intel CoreおよびXeonは、Intel Corporationまたはその子会社の商標です。

お見積り、個別説明、デモンストレーションをご希望のお客様は、お近くの営業員まで!

本文に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証を受けておりません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1
<https://www.an.shimadzu.co.jp/>