


LabSolutions GC用 AOC-6000サポートキット

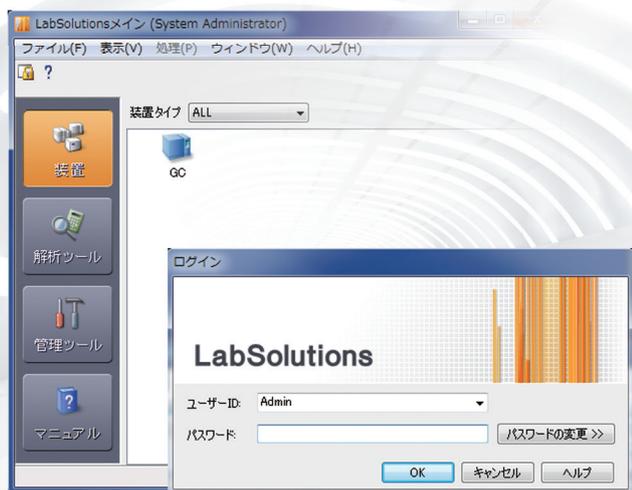


AOC-6000とAOC-5000/5000 Plusに対応

LabSolutions GC用AOC-6000サポートキットは、AOC-6000とAOC-5000/5000 Plusの制御をサポートしています。

LabSolutionsのVer.5.87以降にインストールいただくと、島津製GC (GC-2010 Plusなど) に搭載されたAOC-6000/5000/5000 Plusを制御できるようになります。

当サポートキットをご利用いただくことで、AOC-6000の充実した機能を簡単にお使いいただけます。

また、LabSolutionsのデータベース機能やオーディットトレイルで規制対応をサポートします。

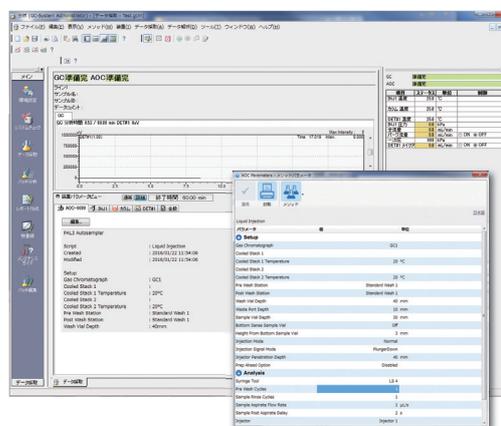

装置メソッド編集画面

多機能オートサンプラ AOC-6000の特長

AOC-6000は、従来のAOC-5000 Plusと同様に、液体注入、ヘッドスペース (HS)、固相マイクロ抽出 (SPME) などさまざまなシリンジ注入が可能です。

さらに、AOC-6000から新たに導入された自動でシリンジを交換するRTC (Robotic Tool Changer) 機能により、異なるシリンジによる試料注入を連続して行うことが可能です。



AOC-6000

AOC-6000サポートキット 仕様

| 項目 | 内容 |
|--------------|--|
| 対応OS | Windows 10、Windows 7 (32bit、64bit) Professional |
| AOC機種と接続可能台数 | AOC-6000/5000/5000 Plus、PC 1台につき1台まで接続可能 |
| 言語対応 | 日本語、英語、中国語 |
| 制御仕様 | <ul style="list-style-type: none"> ・装置パラメータをLabSolutionsメソッドファイルに保存・管理 ・環境設定および装置パラメータのレポート・オーディットトレイルに対応 ・AOC-6000のRTCなど新機能に対応 ・分析の開始、中止等の各種コマンドの送信可能 ・バッチ分析でHSやSPMEを用いたサンプル前処理のオーバーラップ可能 ・キュー機能利用を含め、作業者による誤差を最小として、サンプル作成から、前処理、分析の自動化・効率化を実現 |

AOC-6000 追加キット (GCMS専用)

AOC-6000を備えたGCMSシステムでGC検出器を使って分析する場合に、LabSolutionsによるAOC-6000制御を追加するためのソフトウェアキットです。

GCMSシステムを経由してLabSolutionsからGC分析を行う場合に、AOC-6000制御を安価に実現することができます。



GC検出器付きGCMSシステムにLabSolutions GC制御とAOC-6000制御を追加

本書に記載されている会社名、製品名/サービスマークおよびロゴは、当社、その関連会社または各社の商標および登録商標です。
本文中に「TM」、「®」は記載していません。
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3
(03)3219-(官公庁担当) 5631・(大学担当) 5616・(会社担当) 5685

関西支社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階
(06)6373-(官公庁・大学担当) 6541・(会社担当) 6556

札幌支店 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目8-1 札幌北ビル9階 (011)700-6605

東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 (022)221-6231

郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024)939-3790

つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1
(029)851-(官公庁・大学担当) 8511・(会社担当) 8515

北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷ビル8階
(048)646-(官公庁・大学担当) 0095・(会社担当) 0081

横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階
(045)311-(官公庁・大学担当) 4106・(会社担当) 4615

静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川1丁目1-1 伊伝静岡駅前ビル2階 (054)285-0124

名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階
(052)565-(官公庁・大学担当) 7521・(会社担当) 7531

京都支店 604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1
(075)823-(官公庁・大学担当) 1604・(会社担当) 1603

神戸支店 650-0033 神戸市中央区江戸町9-3 栄光ビル9階 (078)331-9665

岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3-10 住友生命岡山ニューシティビル6階 (086)221-2511

四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6-1 住友生命高松ビル9階 (087)823-6623

広島支店 730-0036 広島市中区袋町4-25 明治安田生命広島ビル15階 (082)248-4312

九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4階
(092)283-(官公庁・大学担当) 3332・(会社担当) 3334

島津コールセンター(操作・分析に関する電話相談窓口) 0120-131691
IP電話等: (075)813-1691

<http://www.an.shimadzu.co.jp/>