

MALDI-8000シリーズ用オプション **MALDI EasyCare**

簡単なメンテナンスで常に最高の性能を

EasyCare機能を搭載したMALDI-8000シリーズなら、ユーザー自身で簡単にイオン光学系のクリーニングを行うことができます。ハイスループット分析などの汚れやすいアプリケーションにおいて、定期的なメンテナンスにかかるコスト、装置のダウンタイムの低減に貢献します。オートチューニング機能で装置の性能を常に最適な状態に維持します。




MALDI-8020 EasyCare

イオン光学系カスタマーメンテナンスガイド

ユーザー自身で汚れた部品（イオン光学系ユニット）に簡単にアクセスして取り外し、洗浄することができます。ソフトウェアウィザードのガイドに従って作業するだけで、ユーザーは迷うことなくすべてのプロセスを安全に行えます。




※イメージです。
作業時には取扱説明書に従い適切な保護具（マスク、ゴーグル、手袋）を装着ください。

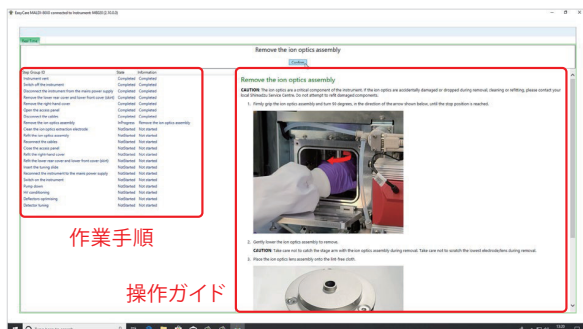

オートチューニング機能

ソフトウェアがイオン光学系ユニットのクリーニング後に必要となる高電圧コンディショニングと装置パラメータのチューニングを自動的に実行し、イオン光学系と検出器を最適化することで装置の性能を常に最適な状態に維持します。

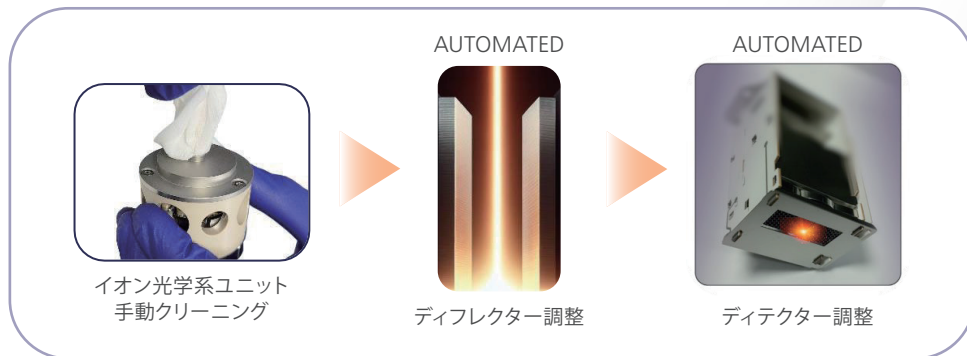

EasyCareアップグレードキット

EasyCare機能はMALDI-8020 EasyCare、またはMALDI-8030 EasyCareをお求めいただくか、もしくはEasyCareアップグレードキットをMALDI-8020、MALDI-8030に追加することでご利用いただけます。

■ 対応機種

卓上型MALDI-MS MALDI-8020 / MALDI-8030 (2024年4月以降のご発注のみ。※キャンペーン品など、一部対応不可の場合もあります。)



MALDI-8030

MALDI-8020/MALDI-8030の主な特長

- ・ リニアモード(MALDI-8020)/デュアル極性リニアモード(正負イオン、MALDI-8030) MALDI-TOF
- ・ 200 Hz固体レーザー、355 nm
- ・ 迅速なサンプル導入のためのロードロックチャンバー
- ・ UVレーザーによるイオン源クリーニング機能
- ・ コンパクトな設置面積の卓上型
- ・ 静かな運転音(<55 dB)

FlexiMassは、株式会社島津製作所またはその関係会社の日本およびその他の国における商標です。
MALDI-8020 EasyCare および MALDI-8030 EasyCareは、Kratos Analytical Ltd.の商標です。

本文に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部

604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

製品情報



価格お問合せ



東京支社 (官公庁担当) (03) 3219-5631
(大学担当) (03) 3219-5616
(会社担当) (03) 3219-5622
関西支社 (06) 4797-7230
札幌支社 (011) 700-6605
東北支店 (022) 221-6231
郡山営業所 (024) 939-3790

つくば支店 (官公庁・大学担当) (029) 851-8511
(会社担当) (029) 851-8515
北関東支店 (官公庁・大学担当) (048) 646-0095
(会社担当) (048) 646-0081
横浜支店 (官公庁・大学担当) (045) 311-4106
(会社担当) (045) 311-4615
静岡支店 (054) 285-0124

名古屋支店 (官公庁・大学担当) (052) 565-7521
(会社担当) (052) 565-7531
京都支店 (官公庁・大学担当) (075) 823-1604
(会社担当) (075) 823-1603
神戸支店 (078) 331-9665
岡山営業所 (086) 221-2511
四国支店 (087) 823-6623

広島支店 (082) 236-9652
九州支店 (官公庁・大学担当) (092) 283-3332
(会社担当) (092) 283-3334

島津コールセンター ☎ 0120-131691
(操作・分析に関する相談窓口) IP電話等:(075) 813-1691