


Experience New Benchmarks with Empower

Waters™ Empower™対応 島津LCドライバパック

**ANALYTICAL
INTELLIGENCE**

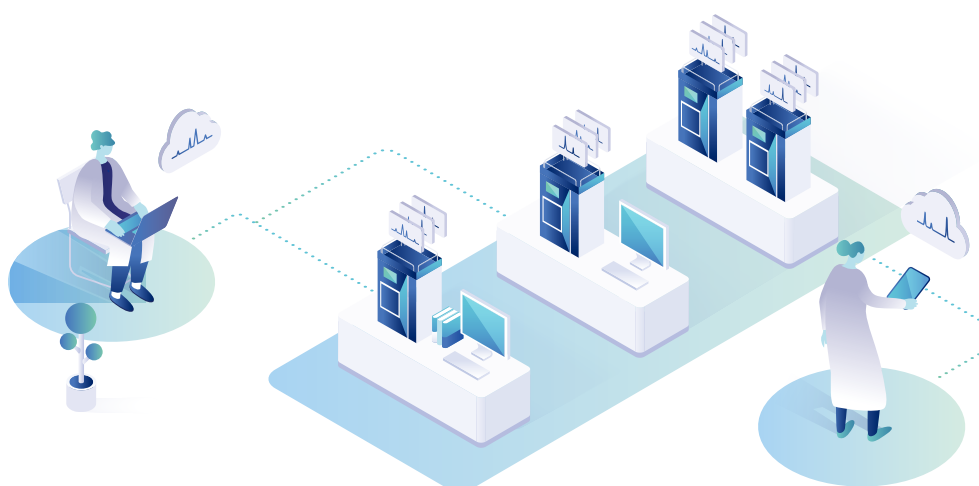


i-Series

i-Series LC-2070/LC-2080の制御に対応

Empowerから島津i-Series LC-2070/LC-2080の制御が可能になります。カラムオープン温度と連携した移動相流量制御機能FlowPilotに加えて、ポンプのチェックバルブの動作不良診断やオートサンプラーの注入系の汚れおよび詰まり診断などといったi-Series LC-2070/LC-2080の先進的な機能をEmpowerで体感できます。

Empowerの装置メソッド編集画面で島津LCの装置パラメータが設定でき、かつ装置メソッドとして各パラメータが保存できますので、初めて島津LCをEmpowerから制御するオペレーターでも安心してご使用頂けます。Empowerの「サンプルの分析」画面に表示されるコントロールパネルには、島津LCを直接制御する機能の他、システムの稼働状況が一目で確認できるモニタ機能、各装置の消耗品の使用頻度をチェックするシステムチェック機能などが装備されていますので、分析前に行う装置の日常点検や分析時における装置の稼働状況モニタとして利用できます。

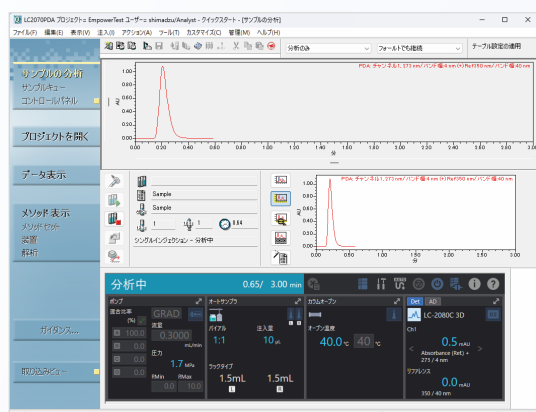

コントロールパネル



システムチェックレポート

対応装置リスト

i-Series LC-2070/LC-2080

ユニット	品 名
i-Series LC-2070/LC-2080	LC-2070 LC-2070C LC-2070C 3D LC-2080C LC-2080C 3D
移動相残量計	MPM-40
検出器	SPD-M40 RID-20A RF-20A / RF-20AXS AD SPD-M30A / SPD-30AM
リザーバ切替バルブ	FCV-11AL / FCV-11ALS
高圧流路切替バルブ	FCV-12AH / FCV-32AH FCV-14AH / FCV-34AH

※ SPD-M30A/SPD-30AMを使用するためには、i-Series LC-2070/LC-2080ドライバに加えて、Nexera™/Prominence™/LC-2010ドライバが必要です。

※ Empower 3.10.0以降かつ島津LCドライバパック Ver. 5.50以降の組み合わせでお使いいただく場合は、1台のコンピュータまたは取り込みサーバー（LAC/E™等）で最大4台の島津LCを制御することができます。ただし、その中でPDA検出器は最大2台まで制御できます。

※ Empower 3.10.0未満または島津LCドライバパック Ver. 5.50未満の組み合わせでお使いいただく場合は、1台のコンピュータまたは取り込みサーバー（LAC/E等）で最大4台の島津LCを制御することができます。ただし、PDA検出器を1台（または2台）接続した場合は、LCの接続台数が3台（または2台）に制限されます。

※ 1台のコンピュータまたはデータ取り込みサーバー（LAC/E等）に島津LCとWaters社製LCシステムを同時に接続することはできません。島津LC専用のデータ取り込みサーバーを別途ご用意ください。



Analytical Intelligenceロゴ、NexeraおよびProminenceは、株式会社島津製作所またはその関係会社の日本およびその他の国における商標です。Waters、EmpowerおよびLAC/EはWaters Technologies Corporationおよびその他の子会社の商標です。

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。

なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。

本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。

治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。

トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部

604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

製品情報



価格お問合せ



東京支社 (官公庁担当) (03) 3219-5631
(大学担当) (03) 3219-5616
(会社担当) (03) 3219-5622

関西支社 (06) 4797-7230
札幌支社 (011) 700-6605
東北支社 (022) 221-6231
郡山営業所 (024) 939-3790

つくば支店 (官公庁・大学担当) (029) 851-8511
(会社担当) (029) 851-8515

北関東支店 (官公庁・大学担当) (048) 646-0095
(会社担当) (048) 646-0081

横浜支店 (官公庁・大学担当) (045) 311-4106
(会社担当) (045) 311-4615

静岡支店 (054) 285-0124

名古屋支店 (官公庁・大学担当) (052) 565-7521
(会社担当) (052) 565-7531

京都支店 (官公庁・大学担当) (075) 823-1604
(会社担当) (075) 823-1603

神戸支店 (078) 331-9665
岡山営業所 (086) 221-2511

四国支店 (087) 823-6623

広島支店 (082) 236-9652
九州支店 (官公庁・大学担当) (092) 283-3332
(会社担当) (092) 283-3334

島津コールセンター ☎ 0120-131691
(操作・分析に関する相談窓口) IP電話等: (075) 813-1691