


## キーボード圧縮試験治具

(パソコンなどの) キーボードのキーの圧縮試験用試験治具です。キーボード圧縮試験治具には、 $\phi 30$  mm 圧盤、キーボードホルダー、圧縮・曲げ負荷治具が付属します。(キーボード圧縮試験治具と組み合わせて) 使用するロードセルの容量に合わせてご注文ください。対応するロードセルは、50 N ~ 10 kN の AG-X plus シリーズ / AGS-X シリーズのロードセルです。

キーボードを、キーボードホルダーに固定します。キーボードホルダーにはマイクロメーターが備えられ、キーボードを X および Y 方向に動かしてキーと圧盤の位置合わせが可能です。

本キーボード圧縮試験治具は、飛散防止カバー付の試験機には設置できません。

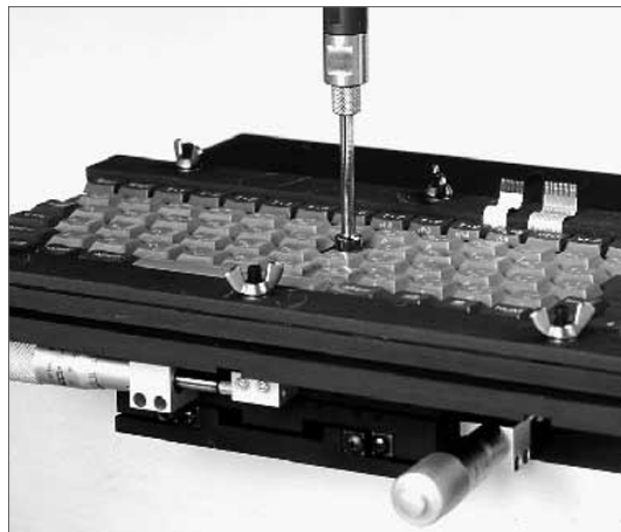

### 適応材料

電子機器

### 操作

キーボードをホルダーに設置し、ホルダーの周囲にあるナットを締めて固定します。マイクロメーターヘッドを用いて、任意の試験箇所と圧盤の位置合わせを行います。

### 仕様

最大容量	適応キーボード寸法		上圧盤直径	温度範囲	上圧盤質量
	幅	長さ			
N	mm	mm	mm	°C	kg
100	最大 460	140 ~ 175	30	0 ~ 40	0.040

## 注文情報

P/N	品名
	キーボード圧縮試験治具 セット内容: 30 mm 上圧盤、キーボードホルダー、圧縮・曲げ負荷治具
346-53925-07	キーボード圧縮試験治具 (AG-X plusシリーズ 10 kNロードセル用)
346-53925-08	キーボード圧縮試験治具 (AG-X plusシリーズ 50 N ~ 5 kNロードセル用)
346-53925-57	キーボード圧縮試験治具 (AGS-Xシリーズ 10 kNロードセル用)
346-53925-58	キーボード圧縮試験治具 (AGS-Xシリーズ 500 N ~ 5 kNロードセル用)
346-53925-63	キーボード圧縮試験治具 (AGS-Xシリーズ 50 N ~ 100 Nロードセル用)



本社地区事業所及び関連事業所認証取得

Windows は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
本文中には、TM、®マークは明記しておりません。  
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。  
外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

# 株式会社 島津製作所

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3  
(03) 3219-(官公庁担当) 5631・(大学担当) 5616・(会社担当) 5735

関西支社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階  
(06) 6373-(官公庁・大学担当) 6541・(会社担当) 6661

札幌支店 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目8-1 札幌北ビル9階 (011) 700-6605

東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 (022) 221-6231

郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024) 939-3790

つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1  
(029) 851-(官公庁・大学担当) 8511・(会社担当) 8515

北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷町ビル8階  
(048) 646-(官公庁・大学担当) 0095・(会社担当) 0082

横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階  
(045) 311-(官公庁・大学担当) 4106・(会社担当) 4615

静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川12丁目1-1 伊伝静岡駅南ビル2階 (054) 285-0124

名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階  
(052) 565-(官公庁・大学担当) 7521・(会社担当) 7532

京都支店 604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1  
(075) 823-(官公庁・大学担当) 1604・(会社担当) 1602

神戸支店 650-0033 神戸市中央区江戸町9-3 栄光ビル9階 (078) 331-9665

岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3-10 住友生命岡山ニューシティビル6階 (086) 221-2511

四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6-1 住友生命高松ビル9階 (087) 823-6623

広島支店 730-0036 広島市中区袋町4-25 明治安田生命広島ビル15階 (082) 248-4312

九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4階  
(092) 283-(官公庁・大学担当) 3332・(会社担当) 3334

グローバルアプリケーション開発センター

京都 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1 (075) 823-1153

東京ハイテクプラザ 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3 (03) 3219-5857

<http://www.an.shimadzu.co.jp/test/>